

# #findyoutflow



© 2017-2020 Flow Sports Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.



## Garanzia

**TERMINI E CONDIZIONI DI FLOW SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD GARANZIA LIMITATA DI 12 MESI**

### COSA COPRE LA GARANZIA

- La riparazione o sostituzione del tuo Flow MINI entro 12 mesi dall'acquisto o dalla consegna, se i materiali, le manodopera e il funzionamento sono difettosi da una parte non a tua discrezione.
- Flow lo sostituisce con una parte simile.
- Se questo dispositivo è venduto al di fuori dell'UE, questa garanzia sarà valida solo se il dispositivo viene utilizzato nel paese in cui è stato venduto.
- Se questo dispositivo è venduto nell'UE, questa garanzia sarà valida solo se il dispositivo viene utilizzato nel paese in cui è stato venduto o se il dispositivo viene utilizzato in Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito.

### COSA NON COPRE LA GARANZIA

- Flow non garantisce la riparazione o sostituzione del prodotto se un difetto è causato da:
  - Danni o guasti accidentali causati da un uso o una cura negligente, uso improprio, abuso, negligenza o poca cura durante l'uso del dispositivo e utilizzo in modo non conforme al Manuale operativo Flow MINI.
  - Danni causati dal non aver eseguito la manutenzione consigliata del dispositivo.
  - Danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni riguardanti la pulizia del dispositivo.
  - Danni causati dal mancato rispetto delle indicazioni di trasporto e di stoccaggio.
  - Uso del dispositivo per scopi diversi da quelli di progettazione originale.
  - Utilizzo di parti montate o rimosse non secondo le istruzioni di Flow.
  - Uso di parti e accessori che non sono componenti originali di Flow.
  - Riparazioni o alterazioni eseguite da soggetti diversi da Flow o dai suoi agenti autorizzati.
  - Manuale assicurativo Flow HeadSTM.

Il caso di dubbio su cosa è coperto dalla garanzia, contatta il servizio clienti Flow.

**SI PREGA DI NOTARE CHE QUESTA GARANZIA RICHIEDE LA PROVA D'ACQUISTO DATATA**  
Per poter utilizzare la garanzia, dovrai fornire la prova d'acquisto del tuo prodotto. Accettare la garanzia senza la prova d'acquisto è a discrezione di Flow Sports Technology. Non accettare la garanzia senza la prova d'acquisto. Accettare la garanzia senza la prova d'acquisto è a discrezione di Flow Sports Technology. Non accettare la garanzia senza la prova d'acquisto.

Questa garanzia è rilasciata ed eseguita da Flow Sports Technology Co., Ltd.  
Per coprire o sostituire Flow MINI o una parte in garanzia, il prodotto deve essere restituito con spedizione prepagata a Flow Sports Technology (Realtà: Ningbo Dapin Electronics Co., Ltd., Jinhao Building, Beiqian District, Shaoxing, Guangdong, PRC).

## Smaltimento

- I prodotti Flow sono realizzati con materiali riciclabili di alta qualità. È bene riciclarli se possibile.
- Il contrassegno seguente indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici normali. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana, si prega di riciclare e sostenere il riciclaggio appropriato dei materiali.
- La scatola, la custodia in cartone e questo manuale sono tutti riciclabili. Si prega di tenerne in considerazione l'ambiente quando si smaltisce questo imballaggio.



## Dichiarazione di non responsabilità

- Utilizzare solo su parti del corpo asciutte e coperte da indumenti. Presenza di lesioni, tagli, abrasioni o irritazioni della pelle può compromettere l'efficacia e la sicurezza dell'uso.
- Utilizzare il prodotto solo su aree di tessuto molle.
- Utilizzare il prodotto solo su parti del corpo asciutte e coperte da indumenti. Presenza di lesioni, tagli, abrasioni o irritazioni della pelle può compromettere l'efficacia e la sicurezza dell'uso.
- Si possono manifestare dei lividi indipendentemente dall'impostazione del controllo o della pressione applicata. Controllare frequentemente le aree trattate e smettere di utilizzare il prodotto al primo segno di dolore o disagio.



**Ordina qui!**



## Ricarica

**Batteria bassa o scarica**  
Quando il tuo dispositivo ha la batteria molto bassa o nulla, nel pannello di controllo verrà visualizzato un LED rosso e il dispositivo potrebbe smettere di funzionare lentamente.  
Non è consigliabile utilizzare il dispositivo se la batteria è al di sotto di questo livello.



**Caricare il tuo Dispositivo**  
Collegare in modo sicuro il caricatore da parete A/C in una presa a muro.  
Il LED indica che il caricabatterie è collegato e lampeggia la carica. Il LED del livello di carica sul pannello di controllo cambiano da Rosso a Ambra & Verde.



**Ricarica Completata**  
Quando il dispositivo è completamente carico, mostrerà tutti e 6 i LED dell'indicatore di alimentazione pieni. Il dispositivo non si accenderà durante il processo di ricarica.



## Pulizia del dispositivo

- Non pulire il dispositivo mentre è in carica.
- Non utilizzare acqua per pulire il dispositivo.
- Non utilizzare detergenti chimici abrasivi o solventi.
- Utilizzare un panno leggermente umido per pulire il dispositivo.
- Successivamente, utilizzare il panno in dotazione per asciugare.



## Manutenzione

- Le Flow HeadsTM in schiuma ad alta densità devono essere sostituite ogni tre mesi oppure devono essere sostituite se ci sono evidenti segni di usura o se si sono sporcate.
- Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.
- Ricaricare il dispositivo mensilmente per mantenere la durata della batteria. Il dispositivo può essere ricaricato in qualsiasi momento e con qualsiasi livello di batteria.
- Ricaricare il dispositivo utilizzando solo il caricatore da parete Flow A/C in dotazione.
- Non tenere il caricatore con il dispositivo alla luce diretta del sole o a temperature superiori a 40°C.
- Il dispositivo e il caricabatterie funzionano in modo ottimale a una temperatura ambiente normale. Non caricare esponendolo alla luce solare diretta o a basse temperature. L'intervallo di temperatura per la ricarica è compreso tra 0°C e 40°C.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito in funzione o mentre è in ricarica.
- Si consiglia di non scaricare completamente la batteria.

## Trasporto/Stoccaggio

- Flow mini è approvato dalla TSA come un oggetto da bagaglio a mano e quindi, deve essere riposto solo nel bagaglio a mano. Se il bagaglio a mano viene controllato al gate, il dispositivo deve essere rimosso dal bagaglio e conservato con il passeggero nella cabina dell'aeromobile.
- Caricare completamente il dispositivo se si ha l'intenzione di non utilizzarlo per molto tempo.

## Grazie per aver acquistato il massaggiatore portatile Flow MINI.

Visitare [support.flow.sportstech.com](http://support.flow.sportstech.com) per assistenza online, video di supporto, suggerimenti generali e informazioni utili su Flow.

Flow Sports Technology zawsze pracuje nad znalezieniem sposobow, aby pomoc sportowcom osiagnac ich cele. Dziękujemy za zaufanie w pomocy jak najlepszego wykorzystania treningow i szybszego dochodzenia do pelnia sprawnosci. Chociaz terapia perkusyjna nie jest nowym pomyslem, nigdy nie uwazalismy, ze istniejcie niezawodna opcja, ktora wykorzystuje wszystkie mozliwosci. Wrocilismy wiec do punktu wyjscia i zaprojektowalismy Flow tak, aby byl inny. **Lekki. Cichy. Akumulator na lata.** Niektorzy nazywaja Flow MINI rewolucja lub przełomowa innowacja. Nazwij go jak chcesz, **uwielbiamy pomagac sportowcom odnalezc swój sposob na powrot do pelni sprawnosci.**

In Flow Sports Technology, lavoriamo sempre per aiutare gli atleti a raggiungere i loro obiettivi. Grazie per aver riposto in noi la tua fiducia per aiutarci a ottenere il massimo dai tuoi allenamenti e per un recupero più veloce. Sebbene la terapia a percussione non sia un'idea nuova, abbiamo sempre pensato che non fosse un'opzione affidabile che potesse soddisfare tutte le tue aspettative. Quindi, ci siamo ci siamo rimessi in discussione e abbiamo progettato Flow in modo che fosse diverso. **Leggero e Silenzioso, Batteria a lunga durata**, alcuni chiamano Flow MINI un dispositivo rivoluzionario o addirittura un "innovazione rivoluzionaria". **Chiamalo come vuoi, adriamo aiutare gli atleti a ritrovare di nuovo il loro ritmo.**

**ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA**  
PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO ASSICURARSI DI AVER LETTO IL MANUALE DI ISTRUZIONI E TUTTE LE AVVERTENZE SUL DISPOSITIVO

## Avvio rapido



Rimuovere con attenzione dalla confezione il dispositivo. Il tuo Flow MINI avrà già la Medium Flow Head™ montata. Per rimuoverla, afferra semplicemente la base della Flow Head™ e tira fino a quando sentirai uno schiocco tipo "pop".

Quando il dispositivo è spento, inserire completamente la Flow Head che hai scelto spingendolo nella presa. Non utilizzare il dispositivo senza una Flow Head.

Per accendere il dispositivo premere il pulsante di accensione grande al centro del pannello di controllo. Premendo nuovamente si attiveranno le varie modalità (vedi a lato). Massaggiare la parte del corpo desiderata alla velocità richiesta e applicare pressione secondo la tua necessità. Cambia le diverse modalità o tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere quando hai finito.

## Modalità

- Il dispositivo è progettato per essere il più facile possibile da utilizzare.
- Premi una volta il pulsante grande di accensione e il dispositivo inizierà a funzionare in modalità Relax, il nostro primo livello.
- Premi di nuovo per il livello due. Modalità rinvigimento.
- Premi ancora una volta per la massima potenza al livello 3. **Modalità ricarica**.
- Premere una quarta volta per avviare la modalità Flow.
- Per spegnere premere un'ultima volta e il dispositivo si spegnerà. Non è necessario fare rientrato, poiché Flow si disattiverà dopo 5 minuti di inutilizzo. Per attivarlo, premi semplicemente il pulsante di accensione.

## Flow Heads™

Il tuo dispositivo è dotato di quattro Flow Head™ intercambiabili, che possono essere sostituite in modo rapido e semplice. Per cambiarle, staccare la testina dal dispositivo. Ci sarà un piccolo schiocco quando la testina si staccherà e si potrà inserirne una nuova.



**Martello**  
La testina tuffante, questa testina è progettata per il trattamento generale del corpo e per gruppi muscolari più grandi.

**Proiettile**  
Il diametro ridotto della testina del proiettile ti rende perfetto per il trattamento muscolare concentrato, per individuare i punti dell'infiammazione e liberarsene una volta per tutte.

**Forcella**  
Perfetta per la colonna vertebrale, la parte inferiore del collo e i tendini di Achille insieme ai principali gruppi muscolari come i polpacci e il quadricipite. Prestare attenzione quando si utilizza la forcella Flow Head™ in aree più delicate e sensibili.

**Medio**  
Realizzato con schiuma PU a celle chiuse, questa testina non porosa & igienica è perfetta per l'uso su tutto il corpo e nelle zone più sensibili.

## Avvertenze

Prima di eseguire un massaggio con Flow, bisogna ottenere l'approvazione del proprio medico, se si presentano le seguenti condizioni: gravidanza, diabete con complicazioni come neuropatia o danno retinale, neuropatia periferica, ulcere di piaghe, infortunio, intervento chirurgico recente, epilessia o emorragia, eresia del disco, sportività, sportività o sportività, recenti sostituzioni articolari o LES, panni o piastre di metallo o qualsiasi altra protesi. Non adatto sfatto da parte di persone di età pari o inferiore a 18 anni.

- Non utilizzare questo dispositivo sulla testa o vicino ai genitali.** Non utilizzare il dispositivo di spalle del C4 prima altezza di metà gita.
- Non posizionare le dita o altri oggetti vicino all'asta o alla presa mentre il dispositivo è in uso.** Non immaginare i capelli nella presa della testina massaggiatore o infilarsi in qualsiasi altra parte mobile del dispositivo.
- Non bloccare le porte di ventilazione del motore.** Evitare l'incendio, il sovriscaldamento o danni nelle porte di ventilazione. Non inserire oggetti nelle porte di ventilazione del motore.
- Non bagnare il dispositivo se non pulendolo con un panno leggermente umido.** Gli agenti portatori di pacemaker devono consultare il proprio medico prima di utilizzare questo dispositivo.


## Sicurezza

- Le persone di età pari o superiore a 14 anni o le persone con capacità fisiche, sensoriali o di ragionamento ridotte devono utilizzare questo dispositivo solo dopo aver ricevuto la supervisione o l'istruzione di una persona responsabile che ha dimostrato l'uso del dispositivo in modo sicuro e ha divulgato i possibili rischi.
- Non utilizzare il dispositivo come se fosse un giocattolo. È necessaria la massima attenzione se utilizzato vicino ai bambini.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua o altri liquidi e non versare acqua sul dispositivo.
- Tenere lontano da fonti di calore e luce solare diretta.
- Mantenere la porta di ventilazione libera da sporcizia, polvere e detriti.
- Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi dal messaggio originale.
- Non immergere con le mani bagnate nessuna parte del caricabatterie da parete o del dispositivo.
- Non scollegare il caricatore a parete A/C tirando il cavo. Per scollegare afferrare la spina, non il cavo.
- Non utilizzare lubrificanti, detergenti, lucidanti o deodoranti per ambienti su qualsiasi parte del dispositivo.
- Contattare il tuo assistente clienti Flow quando il dispositivo deve essere riparato. Non smontare il dispositivo poiché un assemblaggio errato potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.
- Se il dispositivo non funziona correttamente o è caduto, o è danneggiato, o è stato lasciato all'aperto, o ha ricevuto un forte colpo o è caduto in acqua, non utilizzarlo e contattare il team di supporto Flow.

## Sicurezza della Batteria

- Tenere il dispositivo lontano da calore eccessivo e luce solare diretta. Non portare sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento, come fornelli a microonde, stufe o radiatori. Le batterie possono esplodere se surriscaldano.
- Non gettare il dispositivo nel fuoco perché potrebbe esplodere e anche le batterie se danneggiate potrebbero esplodere. Smaltire il dispositivo in conformità con le normative locali.
- Non rompere o forare l'involtura della batteria, né esporla a pressioni esterne elevate. Questo potrebbe causare un cortocircuito o surriscaldamento.

## Cosa si trova all'interno della scatola

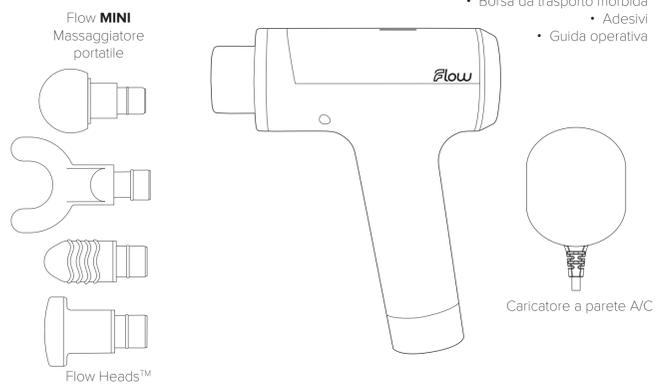

## Panoramica

