

 **PRAXISDIENST**
 Medische artikelen sinds 1953

 **Bestel hier!**

Fero

by Haelvoet


Haelvoet NV BELGIË
 L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER
 T +32 (0) 51 48 66 95 F +32 (0) 51 48 73 19
 INFO@HAELVOET.BE WWW.HAELVOET.BE

Haelvoet SA ZWITSERLAND
 ROUTE DE LA PLAINE 45, 1580 AVENCHES
 T +41 (0) 26 675 46 86 F +41 (0) 21 560 46 46
 INFO@HAELVOET.CH WWW.HAELVOET.CH

Haelvoet S.A.R.L. FRANKRIJK
 PARC EURASANTÉ
 310, AVENUE EUGÈNE AVINÉE, 59120 LOOS
 T +33 (0) 3 21 70 63 71 F +33 (0) 3 21 76 62 67
 INFO@HAELVOET.FR WWW.HAELVOET.FR

Haelvoet S.R.L. ROEMENIE
 PARCUL INDUSTRIAL 1,455200 JIBOU, SALAJ
 T +40 (0) 260 64 22 33 F +40 (0) 260 64 22 55
 INFO@HAELVOET.RO WWW.HAELVOET.RO

WE CREATE FURNITURE TO HEAL, TO CARE & TO MEET

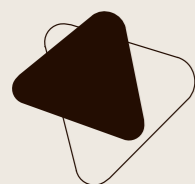



Haelvoet nv
Editie 2016
Haelvoet behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen.
Geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk.



Houten Fero

Fero relaxzetel



Relaxzetel met wielen en neerschuihbare armen

04972 Ergo-line
07578 Classic



Relaxzetel met wielen

04208 Ergo-line
07579 Classic



Relaxzetel

03877 Ergo-line
07580 Classic

Fero rustzetel



Kantelbare rustzetel

05562



Rustzetel

04738

Fero e-move

De Fero e-move is uitgerust met een elektrisch verstelbare been- en rugsteun, eenvoudig te bedienen door een intuïtieve handbediening.



E-move

14255



E-move met wielen

13605



Dankzij onze moderne milieuvriendelijke productieprocessen, een maximaal gebruik van recycleerbare materialen en ons PEFC-certificaat betekent kiezen voor Haelvoet, kiezen voor een eerlijk product.

De afgebeelde Ferozetels kunnen opties bevatten.



Metalen Fero

Fero relaxzetel



Relaxzetel met wielen en neerschuihbare armen

05600 Ergo-line



Relaxzetel met wielen

04749 Ergo-line



Relaxzetel

04219 Ergo-line

07471 Ergo-line met neerschuihbare armen

Fero rustzetel



Kantelbare rustzetel met wielen en neerschuihbare armen

06038



Kantelbare rustzetel zonder wielen met neerschuihbare armen

06036



Rustzetel

05563 Kantelbaar

07022 Niet-kantelbaar

Fero hoog/laag



Fero hoog/laag

13590

Fero Obesitas



Fero obesitas

08018

Fero hoog/laag

Hoogteverstelling

De zetel kan in hoogte versteld worden van 53 tot 83 cm (zithoogte). De hydraulische hoog/laag pomp is gemakkelijk te bedienen via een voetpedaal langs beide zijden van de zetel.

Centrale rem op 4 wielen

De zetel is uiterst wendbaar en mobiel dankzij de grote wielen (Ø 125 mm) waaronder 2 richtingswielen en het centrale remsysteem dat de 4 wielen remt. Het dubbel rempedaal is bereikbaar zowel voor- als achteraan de zetel.

Relax mechanisme

Het relax mechanisme "Ergo-line" zorgt voor minder drukpunten op het lichaam en een verbeterde bloedsomloop (zie p. 14). De relaxfunctie wordt geactiveerd door de hendel, voorzien langs beide zijden van de zetel, naar achteren te brengen.

Opstahulp (*)


Optioneel kan de zetel uitgerust worden met een opstahulp-functie. De opstahulp-functie wordt geactiveerd door de hendel die zich aan beide zijden van de zetel bevindt naar voren te brengen.

* optie bij Fero hoog/laag



Fero Obesitas

De Fero Obesitas zetel is een uiterst comfortabele zetel speciaal ontwikkeld voor bariatrische patiënten. De elektrisch kantelbare rug en de hoogwaardige bekledingsmaterialen bieden een hoog comfort bij langdurig zitten, terwijl de neerschuifbare armen een vlotte transfer mogelijk maken. De Integral designwielen met centraal remmechanisme laten een eenvoudige verplaatsing van de patiënt toe. Bovendien is de zetel zo vormgegeven dat deze zich niet abnormaal onderscheidt van een moderne zorgzetel.





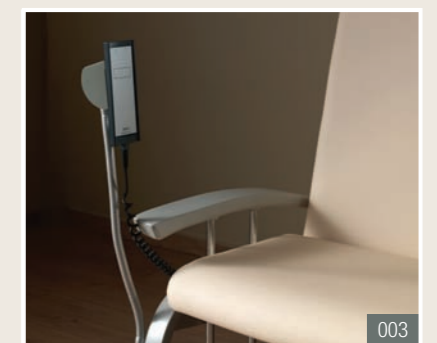


001 Afneembare voetensteun (*).

002 Afneembare beensteun (*).

003 Flexibele handschakelaarhouder (*).

* optie bij Fero Obesitas

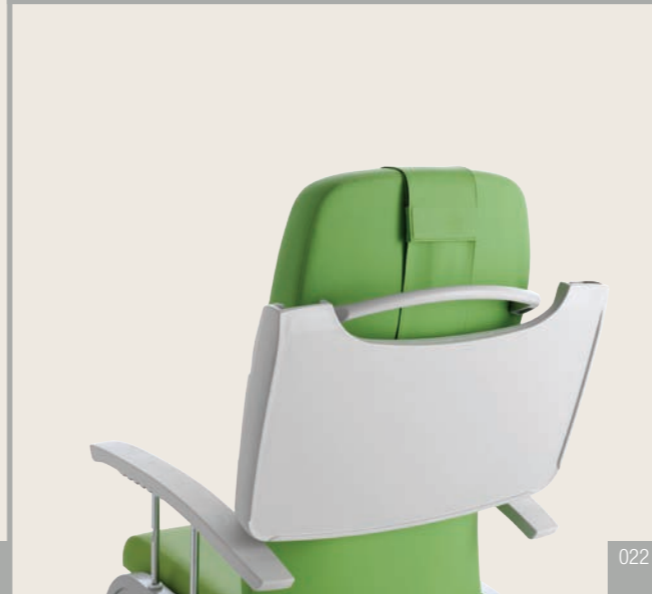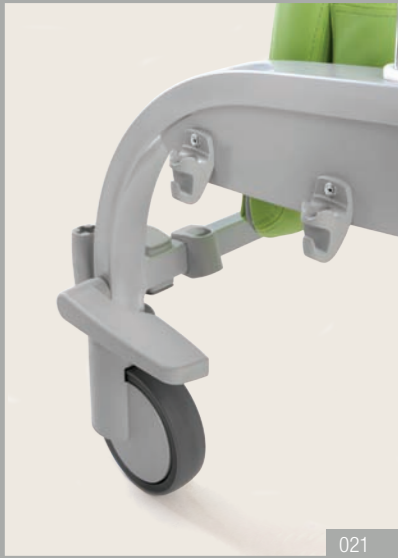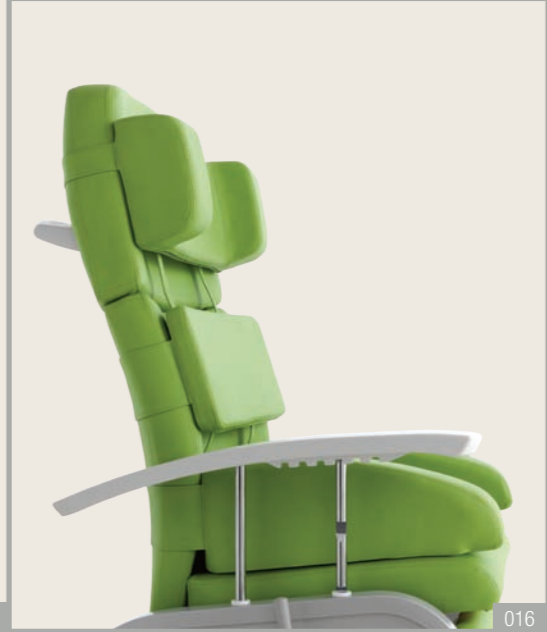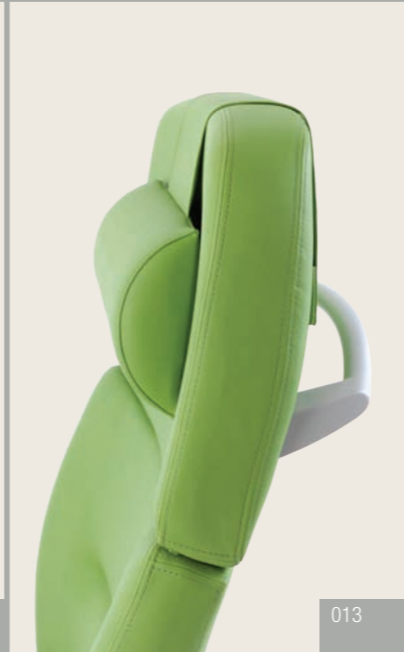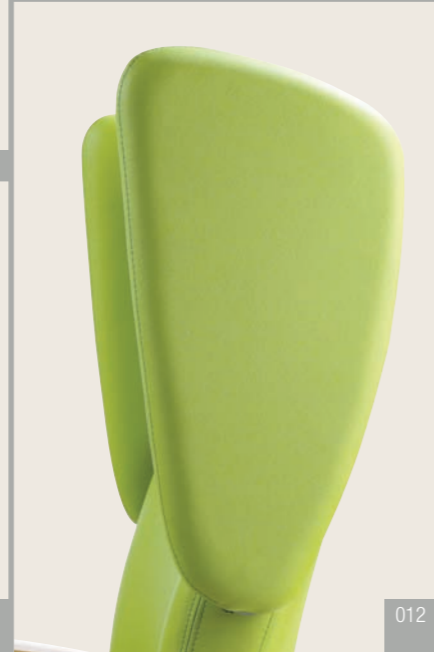

Opties Fero by Haelvoet		Hout								E-move		Metaal								Obesitas	Hoog/ laag		
		04972	07578	04208	07579	03877	07580	05562	04738	14255	13605	05600	07471	04749	04219	06038	06036	05563	07022	08018	13590		
001	Eettafelbevestiging	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	●	
002	Eettafel Elice (enkel in combinatie met eettafelbevestiging)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	
003	Abductieklos (enkel in combinatie met eettafel)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	
004	Designwielen ø 100 mm individueel geremd	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
005	Integral S wielen ø 125 mm centraal geremd	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	●	●		
006	Dubbele design rempedaal	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	●		
007	Individuele rem vooraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
008	Voetensteun	●	●	○	○	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	
009	Geïntegreerde hulpwielen	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	●	-	●	-	●	●	●	●	-	-		
010	Vergrendeling bediening	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	
011	Manueel bijstelbaar beensteun	○	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-		
012	Zijdelingse hoofdsteunen	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
013a	Verstelbaar en afneembaar hoofd- / nekkussen	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	
013b	Afneembare hoofdsteun	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	
014a	Serumhuls	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	●
014b	Serumhouder	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
015	Visco-elastisch zitkussen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	
016	Anatomische reductor	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	
017	Fixatiebeugel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	
018	Afneembare beklede armsteunen	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
019	Half beklede armsteunen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	Brede zwenkbare armsteunen	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-	-	○	○		
021	Accessoirehouders	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
022	Ophanghaak voor eettafel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	
023	Gesloten zijkanten	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
024	Kunststof duwbeugel	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-	●	●		

● : Standaard ○ : Opties - : Niet mogelijk

De Fero relaxzetel

een weldaad voor de zorgvrager

Ergo-line versus Classic

Beide relaxzetels zijn uitgerust met een speciaal voor de zorgsector ontwikkeld mechanisme en laten toe om de zorgvrager te inclineren tot een "Zero-Gravity" positie*.

- De Fero relaxzetel Ergo-line beschikt links en rechts over éénzelfde bedieningshendel met identieke functie. De hendel is gemakkelijk manipuleerbaar en kan slechts in één richting worden bewogen. De bedieningshendel kan in een on/off positie worden geplaatst en blijft deze positie bewaren. In de "on" positie beschikt de resident zodoende over beide handen om zich te positioneren. In tegenstelling tot de Fero relaxzetel Classic inclineren zitting, rugleuning en beensteun simultaan en traploos.
- De Fero relaxzetel Classic kan eenvoudig versteld worden door zich licht af te duwen en dit zonder het manipuleren van een hendel. Deze zetel brengt eerst de benen naar omhoog, waarna het mogelijk wordt de gehele zetel verder te inclineren. Net zoals het synchroon gestuurde mechanisme vergt een nieuwe positie bijzonder weinig inspanning.

Comfort

De Fero relaxzetel is volledig afgestemd op de behoeften van de zorgvrager. Voor de zorgvrager is het zitcomfort uiterst belangrijk. In de Fero relaxzetel Ergo-line en Classic voelt de zorgvrager zich uitzonderlijk goed ondersteund. Bij de verschillende posities die het lichaam in de zetel aanneemt, wordt rekening gehouden met de druk van het lichaam en de stand van de lichaamsdelen ten opzichte van elkaar. Dit brengt minder afweerspanning teweeg en voelt comfortabel aan. Bij houdingsveranderingen blijven de lenden continu gesteund dankzij het ingenieuze mechanisme. De volledige ondersteuning van de onderbenen zorgt ervoor dat de belasting op het kniegewricht afneemt van zodra het mechanisme van de relaxzetel in werking treedt. In de "Zero-Gravity" positie* wordt de kniebelasting zelfs gereduceerd tot een verwaarloosbaar niveau. Kussens om de knieholte te ondersteunen worden hierdoor overbodig. Het verstelbare nekkussen zorgt voor een optimale ondersteuning van nek en hoofd.

Bloedsomloop en ademhaling

De zorgvrager, en vooral de oudere zorgvrager, lijdt vaak aan bloedsomloop- en ademhalingsstoornissen, zoals arteriosclerose, atheromatose, veneus ulcus, diabetische voet, hartdecompensatie, longproblemen zoals bv. emfyseem, verminderde longcapaciteit, enz. Door de eenvoudige verstelbaarheid van de relaxzetel kan men de houding gemakkelijk wijzigen.

Telkens er een houdingswijziging gebeurt, werkt dit in op de perfusie-ventilatie verhouding van de longen. De longalveolen worden geprikkeld, waardoor meer surfactans afgescheiden wordt. Daardoor blijven de alveolen elastisch en kan de oxygenatie van het bloed beter gebeuren. De houdingsveranderingen, en in het bijzonder de "Zero-Gravity" positie*, zorgen voor een "stressarme" bloedsomloop.

Aangezien de benen bijna op het niveau van het hart komen, wordt er minder veneuze druk in de onderste ledematen opgebouwd. Dit resulteert in minder vermoeide benen en een gemakkelijker genezingsproces van mogelijk chronische wonden aan de benen.

Drukvermindering

De synchrone verstelling van zitting, rugleuning en beensteun sluit schuifkracht op de stuit uit. Verschillende schuim-densiteiten in zitting en rugleuning zorgen voor een gespreide drukverdeling en voor een vermindering van de schuifkracht. In combinatie met een uitgesproken inclinatie van de zitting in de "Zero-Gravity" positie* resulteert dit in een optimale ondersteuning van het lichaam en een sterke vermindering van drukletsels.

Opstaan uit de zetel

Het opstaan uit de zetel gebeurt bijzonder patiëntvriendelijk door de aangepaste zithoogte en de beensteun die ver genoeg onder de zit kan wegklappen. De voeten kunnen voldoende naar achteren worden geplaatst zodat de opstapbeweging optimaal kan ingezet worden. De brede en verlengde knoparmleuningen bieden de nodige steun indien noodzakelijk.

Functionaliteit

Tal van uitbreidingsmogelijkheden, zoals een anatomische reductor, extra vergrendeling, serumhouder, afneembaar hoofdsteun, beklede armsteunen, zit in visco-elastisch schuim, enz... verruimen de inzetbaarheid van de relaxzetel. Beide zeteltypes kunnen bovendien uitgerust worden met een lichte, sterke, schokbestendige en eenvoudig te plaatsen kunststof eettafel.



* "Zero-Gravity" positie: Deze zit/lighouding is geïnspireerd op NASA-data over een neutrale lichaamspositie, die alle spierkrachten omzet tot een biomedisch evenwicht.